


8320KL

User calibration • Calibración del usuario • Etalonnage par l'utilisateur

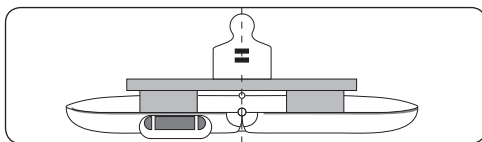

English

This scale has been factory calibrated, and does not require calibration prior to use. If required, the scale can be calibrated following this procedure.

1. Press ON key to power on the scale.
2. Before the display reads zero, press the KG/LB button three times. On the third push hold down the LB/KG button until the display reads "CAL".
3. When the display reads "5.00", place 5 kg weight on the scale and wait until the display shows 4 digits.
4. When the display reads "10.00", place an additional 5 kg weight on the scale, for a total of 10 kg, and wait until the display shows 4 digits.
5. The scale will power off automatically and calibration is complete.

Español

Esta báscula ha sido calibrada en fábrica y no requiere calibración antes de su uso. Si es necesario, puede calibrar la báscula.

1. Encienda la balanza por apretar la tecla ON.
2. Antes de que la balanza se pone a zero, apréte la tecla KG/LB tres veces. En el tercer empuje, mantenga presionado el botón LB / KG hasta que la pantalla muestre «CAL».
3. Cuando « 5.00 » aparece en la pantalla, ponga 5 kg de peso en la balanza y espere hasta que la pantalla muestre 4 dígitos.
4. Cuando « 10.00 » aparece en la pantalla, ponga 5 kg de peso en la balanza, para un total de 10 kg, y espere. La pantalla mostrará 4 dígitos.
5. La balanza se apagará automáticamente. Ya se ha finalizado la calibración.

Français

Cette balance a été calibrée en usine, et n'a pas besoin d'être calibrée avant l'utilisation. Si requis, la balance peut être calibrée.

1. Appuyer la touche ON pour allumer le pèse-bébé.
2. Avant la reinitialisation de la balance à zéro, appuyez trois fois sur le bouton KG / LB. Au troisième appui, maintenez le bouton LB / KG enfoncé jusqu'à ce que l'écran affiche «CAL».
3. Lorsque « 5.00 » s'affiche à l'écran, mettre un poids de 5 kg sur le pèse-bébé et attendre jusqu'à ce que l'écran affiche 4 chiffres.
4. Lorsque « 10.00 » s'affiche à l'écran, mettre un poids de 5 kg sur le pèse-bébé, pour un total de 10 kg, et attendre jusqu'à ce que l'écran affiche 4 chiffres.
5. Le pèse-bébé se met hors tension automatiquement. L'étalonnage c'est terminé.

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

www.homscales.com

For more information, visit www.homscales.com