

Health o meter[®]

P r o f e s s i o n a l

Model Number: 280HR Infant Measuring Mat



Intended Use

This Health o meter[®] Professional infant measuring mat is intended to be used by trained medical staff. This product was designed to measure pediatric patients who are safely positioned on the mat. Do not modify the product or use it for anything other than its intended purpose.

Cautions and Warnings

Before using the measuring mat please make time to read the following safety instructions:

- To prevent patient injury, the patient must be attended throughout the entire measuring event.
- Ensure to measure the infant on a flat, secure surface.

In no event whatsoever shall Pelstar, LLC be liable for damages or injuries arising from or connected with the assembly, use, or misuse of its products.

Specifications

Model	280HR
Range of measurement	10 ~ 110 cm (3.9" ~ 43.3")
Division of measurement	5mm / 1/4"
Product dimensions	1400mm (L) x 300mm (W) / 55.1" (L) x 11.8" (W)
Product weight	.4kg / .88lb
Operating Temperature	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F
Storage Temperature	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA www.homscal.es.com


Health o meter[®] Professional 280HR

© Pelstar, LLC 2023

weigh**easier**[®]

How to Use the Measuring Mat

1. Gently lay the infant onto the measuring mat. Ensure the infant's head is aligned at the top of the mat along the headpiece positioner.
2. While keeping the infant positioned on the mat, lift the footpiece positioner towards the infant's feet.
3. Straighten the infant's legs and gently press them downwards onto the mat.
4. Align the footpiece positioner onto the soles of the baby's feet.
5. Read the length measurement using the CM or IN markings on the measuring mat.

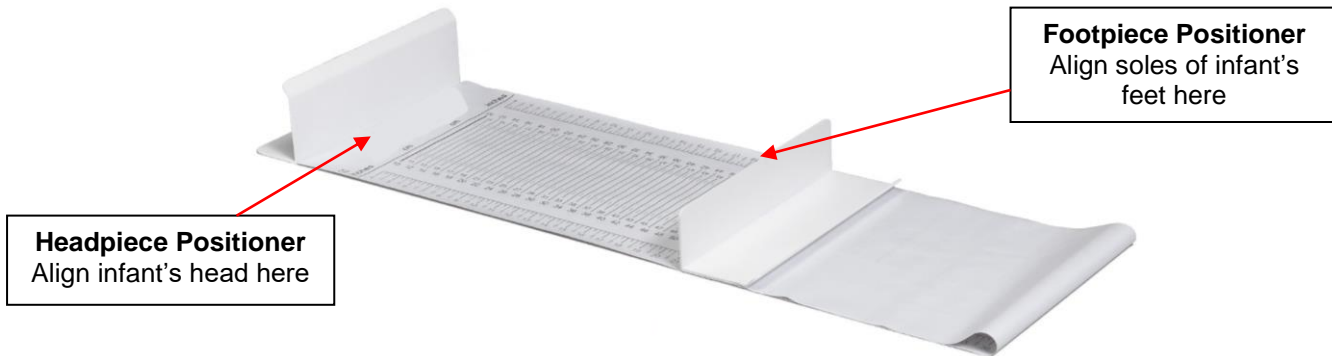

Cleaning and Disinfecting

1. Health o meter® Professional recommends using one of the following solutions on a soft cloth or disposable wipe:
 - mild soap and water solution
 - 70% isopropyl alcohol
 - solution with 1-5% hydrogen peroxide concentrationAfter cleaning/disinfecting, wipe with a cloth dampened with water and then with a clean dry cloth. To avoid residue build-up or damp surfaces, ensure all parts are completely dry after cleaning.
2. Never use rough or abrasive materials to clean the mat.
3. Do not submerge the mat in water or any other liquid.
4. Do not pour or spray fluids directly on the mat.

Warranty

This Health o meter® Professional product is warranted from date of purchase against defects of materials or in workmanship for a period of two (2) years. For the complete warranty coverage information visit www.homscales.com.



PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 USA

1-800-638-3722 or 1-708-377-0600

PLEASE REGISTER YOUR SCALE FOR WARRANTY COVERAGE AT:

www.homscales.com

Health o meter® is a registered trademark of Sunbeam Products, Inc. used under license. Health o meter® Professional products are manufactured, designed, and owned by Pelstar®, LLC. We reserve the right to improve, enhance, or modify Health o meter® Professional product features or specifications without notice.

© Pelstar®, LLC 2023

Health o meter®

P r o f e s s i o n a l

Número de modelo: 280HR Tapete de medición infantil



Uso

EL tapete de medición infantil de Health o meter® está diseñado para ser utilizado por personal médico capacitado. Este producto fue diseñado para medir pacientes pediátricos colocados de forma segura sobre el tapete. No modifique el producto ni lo utilice para ningún fin distinto a su uso previsto.

Precauciones y advertencias

Antes de utilizar el tapete de medición, lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad:

- A fin de evitar lesiones, el paciente debe ser atendido durante todo el proceso de medición.
- Asegúrese de medir al bebé sobre una superficie plana y segura.

Pelstar, LLC no será responsable, bajo ninguna circunstancia, por daños o lesiones que pudieran ser derivados de o relacionados con el armado o uso de sus productos.

Especificaciones

Modelo	280HR
Rango de medición	10 ~ 110 cm (3.9" ~ 43.3")
División de medición	5mm / 1/4"
Dimensiones del producto	1400mm (L) x 300mm (W) / 55.1" (L) x 11.8" (W)
Peso del producto	.4kg / .88lb
Temperatura de funcionamiento	5°C ~ 35°C / 41°F ~ 95°F
Temperatura de almacenamiento	0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F



PELSTAR, LLC 9500 West 55th St. McCook, Illinois 60525-7110 EUA www.homscases.com


280HR de Health o meter® Professional

© Pelstar, LLC 2023

weigh**easier**®

Cómo utilizar el tapete de medición

6. Coloque cuidadosamente al bebé sobre el tapete de medición. Asegúrese de que la cabeza del bebé esté alineada con la parte superior del tapete sobre el posicionador de cabeza.
7. Con el bebé colocado sobre el tapete, lleve el posicionador de pies hacia los pies del bebé.
8. Alinee las piernas del bebé y presiónelas suavemente sobre el tapete.
9. Alinee el posicionador de pies con las plantas de los pies del bebé.
10. Lea la medición de longitud utilizando las marcas de CM o IN del tapete.

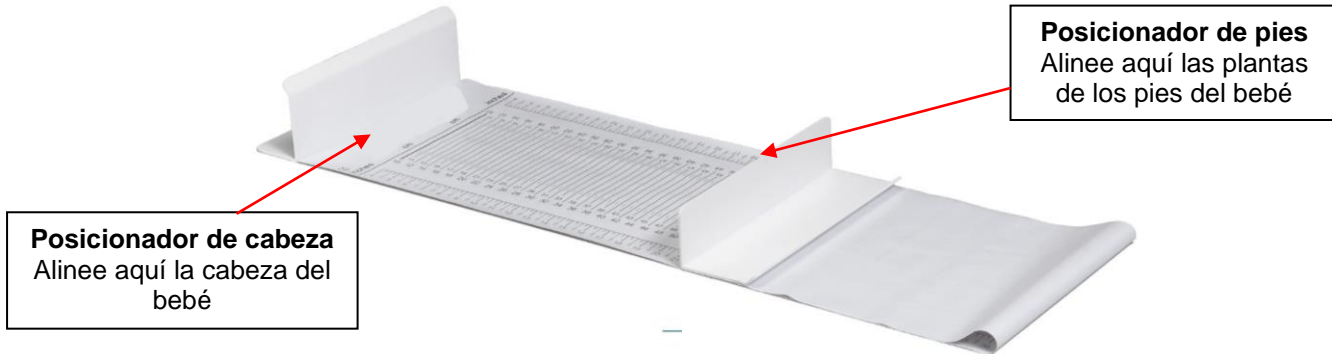

Limpieza y desinfección

5. Health o meter® Professional recomienda utilizar una de las siguientes soluciones sobre un paño suave o una toallita desechable:
 - solución de jabón suave y agua
 - alcohol isopropílico al 70%
 - solución de peróxido de hidrógeno al 1-5%Después de la limpieza/desinfección, limpie el tapete con un paño húmedo y después con un paño seco. A fin de evitar la acumulación de residuos o las superficies húmedas, asegúrese de que las partes estén completamente secas tras la limpieza.
6. Nunca utilice materiales ásperos o abrasivos para limpiar el tapete.
7. No sumerja el tapete en agua o en cualquier otro líquido.
8. No vierta o rocíe líquidos directamente sobre el tapete.

Garantía

Este producto Health o meter® Professional cuenta con garantía a partir de la fecha de compra contra defectos de materiales o mano de obra por un periodo de dos (2) años. Consulte la información completa sobre la cobertura de la garantía en el sitio web www.homscales.com.



PELSTAR®, LLC

9500 West 55th St. McCook, IL 60525-7110 EUA

1-800-638-3722 o 1-708-377-0600

REGISTRE SU BÁSCULA PARA QUE QUEDE CUBIERTA POR LA GARANTÍA EN:

www.homscales.com

Health o meter® es una marca registrada de Sunbeam Products, Inc., usada bajo licencia. Los productos Health o meter® Professional son fabricados y diseñados por y propiedad de Pelstar®, LLC. Nos reservamos el derecho de mejorar o modificar las características o especificaciones de los productos Health o meter® Professional sin previo aviso.

© Pelstar®, LLC 2023